

Total Lift Bed

The First Step to Early Mobility



品名:トータルリフトベッド(Total Lift Bed)
型番 KA-ZA002
希望小売価格 オープン
東京支店 (03)3648-1111(代)
札幌支店 (03)3648-1171(代)
仙台支店 (011)271-1181(代)
さいたま支店 (02)277-7311(代)
横浜支店 (042)795-3800(代)
名古屋支店 (052)963-0600(代)
大阪支店 (06)6443-5791(代)
広島支店 (082)293-1311(代)
福岡支店 (092)461-1131(代)
MDA東京 (03)3813-5588(代)
MDA大阪 (06)6443-8791(代)

ベッド仕様

全長 (ニュートラル位置) 218cm	キャスター径 12.7cm
全長 (全伸長) 228cm	最大使用者体重 193kg
最大伸縮幅 30cm	安全動作荷重 280kg
全幅 104cm	立ち上がり用最大傾斜82°
床面から床板までの高さ (低床時) 46cm	最大背角度63°
床面から床板までの高さ (高床時) 75.5cm	最大膝角度25°
離床アーム	最大足下げ角度-54°

標準搭載機能


- ローエアロス搬能付エアマットレス(蒸気透過性防水トップシート)
(サイズ: 幅99.4cm 長91.4cm 厚さ17.8cm)
- バッテリー
- スケール
- CPR(電子式、手動式)
- 離床アーム

独自機能

- 早期離床直立用チルト機能
- 座位による運動訓練用ボード
- 電子調整式フットボード
- 体重負荷量計算システム
- 早期離床用サポートストラップ
- キャスターの自動格納

オプション

- ① 酸素ボンベホルダー:KC-83C 希望小売価格 22,000(税抜)
- ② IVポーラー:KC-56 希望小売価格 11,000(税抜)
- ③ TLB用二股IV受:KX-Z99 希望小売価格 オープン

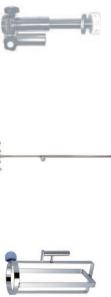

※計量法検定非対応。本ベッドによる計量値は、取引・証明行為には使用できません。
製品の仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがあります。カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

パラマウントベッド株式会社

本社 (03)3648-1111(代)
東京支店 (03)3648-1171(代)
仙台支店 (011)271-1181(代)
さいたま支店 (02)277-7311(代)
横浜支店 (042)795-3800(代)
名古屋支店 (052)963-0600(代)
大阪支店 (06)6443-5791(代)
広島支店 (082)293-1311(代)
福岡支店 (092)461-1131(代)
MDA東京 (03)3813-5588(代)
MDA大阪 (06)6443-8791(代)

2018.05

⚠️ 安全に関するご注意
製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
製品のお求め、ご相談は……

Early...Often...Outcomes



残り23時間の重要性

早期離床のための訓練は一日一時間までしかできないとは限りません。トータルリフトベッド(TLB)があれば、付き添いの看護師一人がボタンを押すだけでも患者を動かすことができ、患者や看護師の怪我のリスクも最小限に抑えることができます。

Weight Bearing Control System

という考え方


患者の運動能力の回復を、かつてない画期的な方法で把握します。ベッドの傾斜角度のデータが送られ、デジタル画面に患者の体重負荷量(実測値と%割合)を表示します。医療従事者が患者の体重負荷や立位状態を管理できるため、各患者の能力に沿ったリハビリーションや歩行の準備へと患者を導くことができます。

離床プロトコルへの対応

TLBは、ご使用されている早期離床プロトコルや患者の安全対応プログラムをサポートします。患者がより安全に立ち、動き、臀部や肩にかかる力を両足に配分できるよう支えるとともに、患者の転倒や怪我を予防する機能も備えています。

立位の安全

患者が動いているときも立っているときも、柔軟性のあるストラップシステムが患者のリハビリをサポートします。ベルクロストラップは、洗浄も可能です。

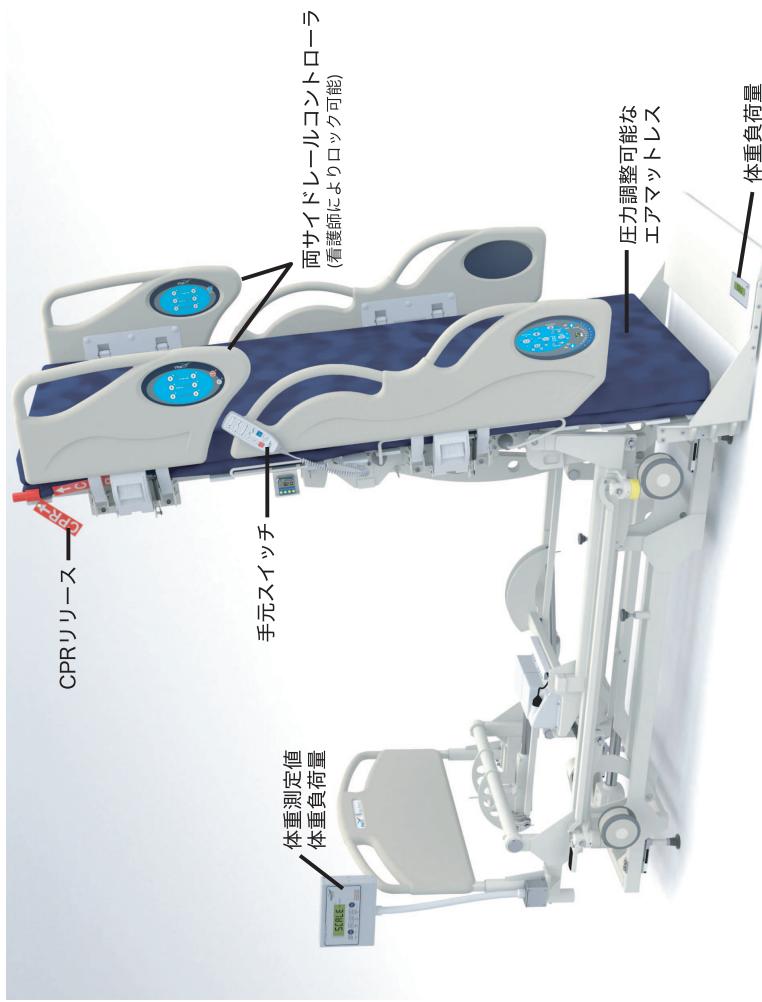

トレンドレンブルグ



チエア

